

BOLETIN INFO-13 2014

NIXFARMA

“ Creación de Colecciones de Artículos ”

QWERTY

Julio de 2014

Introducción.

En este 13 boletín de 2014 queremos recordar como se pueden crear en **Nixfarma** colecciones de artículos.


Una colección es un conjunto de artículos que seleccionamos desde cualquier proceso de **Nixfarma** (estadísticas, inventario, a través del query, etc o manualmente) y que nos interesa tener agrupados en una colección para posteriormente poder obtener informes sobre ellos e incluso realizar cambios masivos.

Para comprender mejor el funcionamiento de las colecciones, vamos realizar un ejemplo de crear una colección de todos los productos que tenemos en la ficha de almacén que tengan por error fecha de caducidad antigua.

Operatoria.

En primer lugar vamos a localizar todos los productos con ficha en el almacén con fecha de caducidad anterior al mes de Julio de 2014.

Para ello debe acceder al selector de **Nixfarma** “ Almacén / Ficha ”

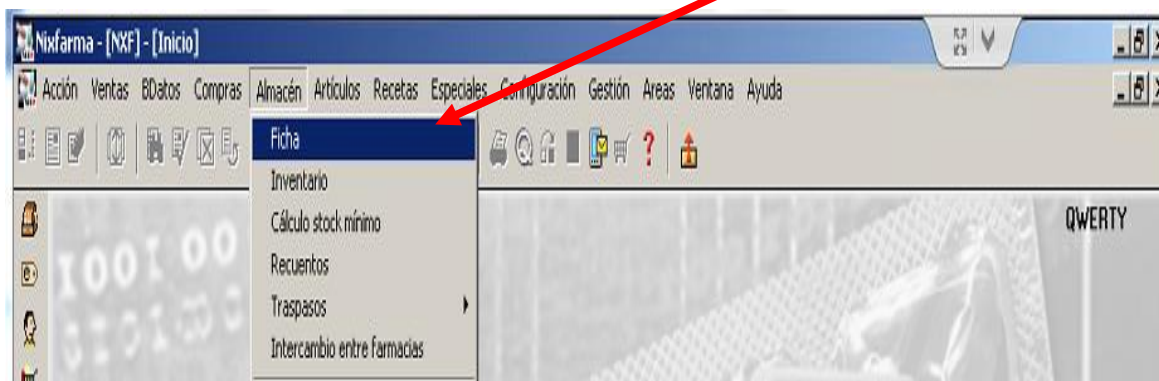

Al acceder a este selector pulse el icono del Prismático o F7, a continuación en el campo " F. Caducidad " indique <0714 (menor de Julio de 2014) y por último pulse el icono de Ejecutar o F8.

The screenshot shows the 'Fichas de artículos' window in the Nixfarma application. The 'F. caducidad' field is highlighted with a red circle, and a red arrow points to it from the text above. The field contains the value '<0714'. The window title is 'Nixfarma - [NXF] - [Fichas de artículos]' and the user is 'OWERTY' consulting on '09/07/2014'. The interface includes various tabs like 'General', 'Mvtos.', 'Exhibs', 'Ofertas', 'Precios', 'Cambios PVP', 'Tarifas', 'Relativos', and 'Notas'. The 'F. caducidad' field is located in the 'Relativos' section.


A continuación aparecerán en pantalla todos los productos con o sin stock cuya fecha de caducidad es inferior a Julio de 2014. Pinche el botón aceptar.

The screenshot shows the 'Resultado de la consulta' dialog box. It contains a table with the following data:


| Clase | Artículo | Descripción | PVP pts | PVP euros | Baja | Stock | Almacén |
|-------|----------|---|---------|-----------|--------------------------|-------|----------|
| PAR | 028118 | COMBUR 9 TEST 100 TIRAS | 11.988 | 72,05 | <input type="checkbox"/> | 1 | FARMACIA |
| PAR | 038232 | ECHINACEA PTK 42 DHU GOT 50 ML | 2.161 | 12,99 | <input type="checkbox"/> | 0 | FARMACIA |
| PAR | 046974 | FILORGA MESOTHERAPIST | 20.798 | 125,00 | <input type="checkbox"/> | 0 | FARMACIA |
| PAR | 048573 | FILORGA MESO MASK | 7.021 | 42,20 | <input type="checkbox"/> | 0 | FARMACIA |
| PAR | 051250 | LEPTANDRA COMP. HEEL 30 ML | 2.246 | 13,50 | <input type="checkbox"/> | 0 | FARMACIA |
| PAR | 067199 | METACAM SUSP ORAL 100 ML VET | 10.815 | 65,00 | <input type="checkbox"/> | 0 | FARMACIA |
| PAR | 077941 | FORTEKOR 5 14 COMP VET | 2.770 | 16,65 | <input type="checkbox"/> | 0 | FARMACIA |
| PAR | 094631 | COMBUR 9 TEST 50 TIRAS | 7.521 | 45,20 | <input type="checkbox"/> | 1 | FARMACIA |
| PAR | 110288 | FILORGA HYDRA- FILLER 50 ML | 8.868 | 53,30 | <input type="checkbox"/> | 0 | FARMACIA |
| PAR | 147504 | AURIZON PERROS 10 ML | 2.912 | 17,50 | <input type="checkbox"/> | 0 | FARMACIA |
| PAR | 150125 | PEDIASURE DRINK 4 X200 ML VAINILLA | 1.406 | 8,45 | <input type="checkbox"/> | 0 | FARMACIA |
| PAR | 150862 | LISTERINE MENTOL 250 ML | 990 | 5,95 | <input type="checkbox"/> | 2 | FARMACIA |
| PAR | 151685 | LIFT C X P OJOS ANTIARRUGAS TENSOR DE F | 3.810 | 22,90 | <input type="checkbox"/> | 0 | FARMACIA |

The 'Aceptar' button is circled in red.


Para crear la colección de los artículos con caducidad antigua pinche en el icono de Guardar colección de artículos.

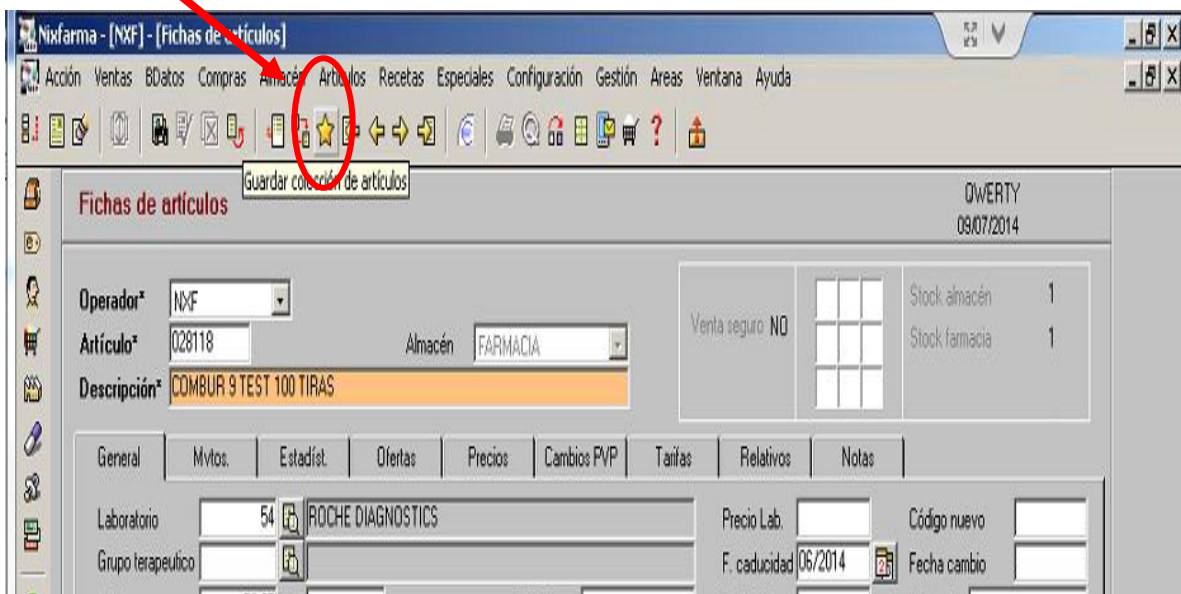


A continuación le aparece la ventana de Guardar colecciones, en ella póngale nombre a la nueva colección y pinche el icono de Crear.

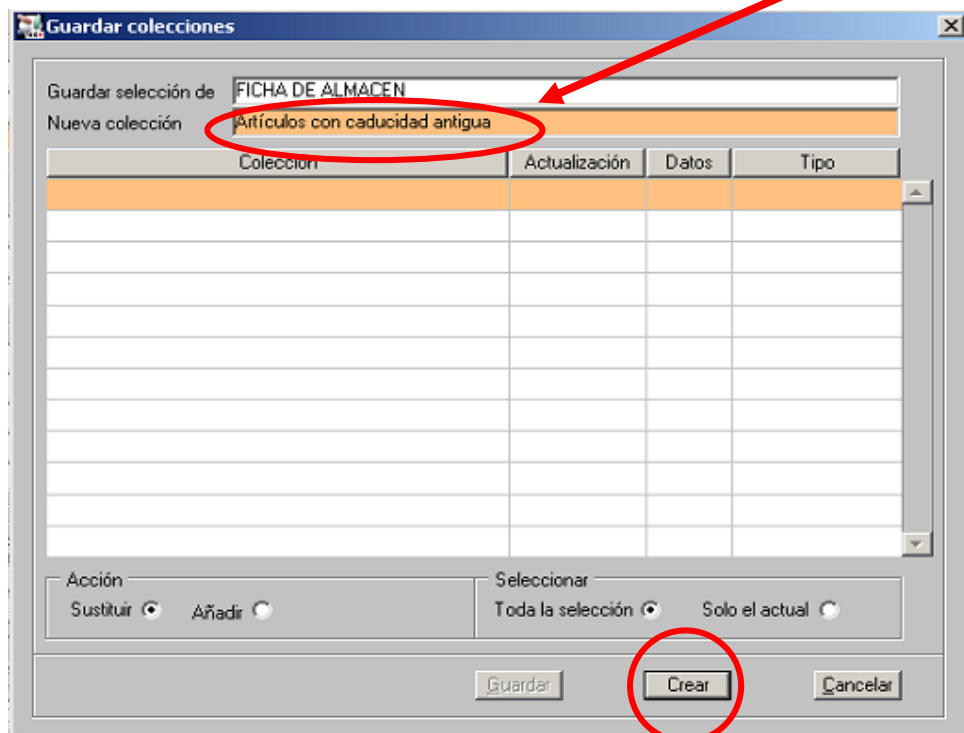

Pulse "Si" al mensaje de creación de la colección.

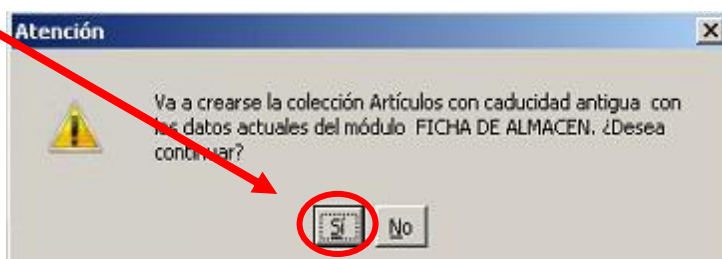

Las colecciones quedan guardadas en el selector de **Nixfarma** “ **Artículos / Colecciones de artículos** ”.

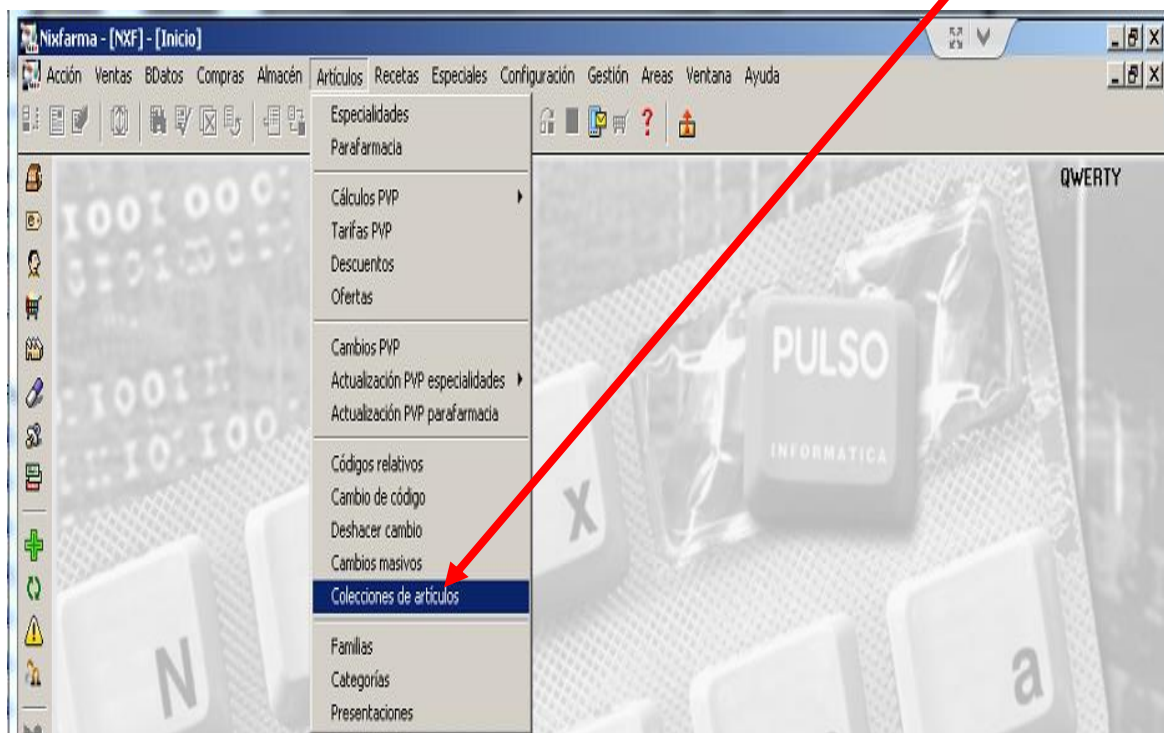

En el siguiente boletín realizaremos un cambio masivo de toda la colección creada en el ejemplo de hoy, para así de forma masiva borrar todas las fechas de caducidad de los productos de la colección.

En caso de cualquier duda póngase en contacto con nosotros en el teléfono 96.362.90.62 y pida le pasen con el Departamento de Formación.



Gracias por confiar en nosotros